

Info patient “distracteur smile”

Une consultation est planifiée une semaine après la chirurgie.

Le distracteur est activé deux fois par jour, par le biais d'une rotation jusqu'au témoin de couleur suivant. Deux rotations d'un tiers de tour fois par jour correspond à une ouverture de 0,6 millimètre par jour.

Pendant cette période d'expansion, il importe que:

- le distracteur soit toujours sous tension.
- le diastème entre les deux dents frontales s'élargisse chaque jour progressivement.


La clé de serrage du patient est placée sur l'axe médian du module du distracteur et est soumise à un mouvement rotatif de haut en bas. Votre chirurgien ou votre orthodontiste se chargera de vous montrer l'opération à l'aide d'un miroir lors de la première activation.

De cette manière, une période d'activation de 10 jours permettra une ouverture d'au moins 6 mm entre les deux dents frontales.

Afin de permettre l'évaluation correcte de l'expansion, vous devez assister à une ou deux consultations chez le praticien. En règle générale, cette période dure entre une et trois semaines. Une fois l'expansion visée atteinte, le praticien bloquera le distracteur. Cette opération aura pour effet d'empêcher tout mouvement du distracteur.


Le distracteur doit être maintenu en bouche dans cette position pendant une période allant de 3 à 6 mois. Il peut arriver que le distracteur se desserre légèrement au cours de cette période. Dans ce cas, sollicitez simplement un rendez-vous pour une consultation afin de le remettre en place.

Nettoyez le distracteur quotidiennement à l'aide d'une brosse à dents souple.

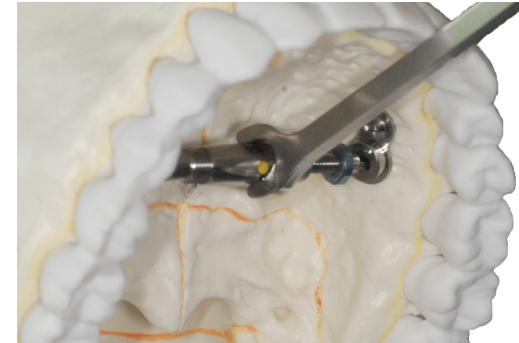

Activation

Glissez la clé de serrage au niveau de l'axe médian du distracteur et exercez une pression de haut en bas.

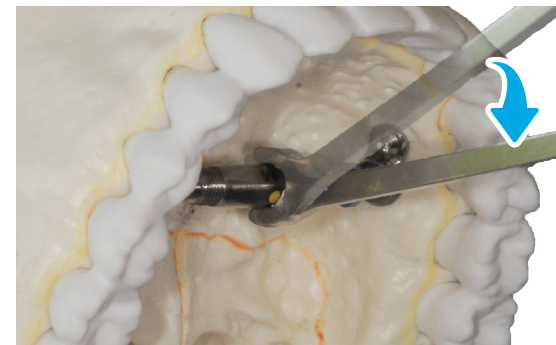




Tournez la clé d'un tiers de tour jusqu'au témoin de couleur suivant. Effectuez cette opération deux fois par jour.



Distracteur smile actif.



Distracteur smile actif.

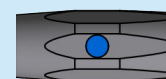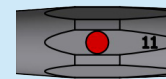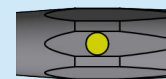

 titamed.

“Giving the people a nice smile.”

